

Encendido



Active el monitor de cuidado cardíaco presionando brevemente el botón ON en la parte posterior hasta que sienta una vibración/pitido y vea el icono del triángulo LED parpadear.  Si la luz de estado de la batería parpadea en rojo, cargue el dispositivo antes de usarlo.

Carga: Conecte la base de carga a la fuente de alimentación y coloque el Monitor Cardiac-Care en la base. Espere a que la luz de estado de la batería cambie de rojo fijo a verde fijo, lo que indica que está completamente cargada. Cargue el dispositivo durante 45 minutos diarios; una recarga completa puede tardar hasta 3 horas.

Preparando tu piel




- Recorte cualquier vello en el pecho según sea necesario.
- Limpie la piel con agua tibia y jabón. Deje secar.
- Evite usar lociones o cremas antes de aplicar los electrodos adhesivos.

Accesorio de electrodo



Conecte un electrodo adhesivo a la parte posterior del monitor y otro al conector rojo.

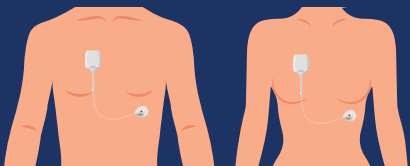

Aplicación de electrodos: Quite el plástico de los electrodos y colóquelos en el pecho como ilustrado. Si tiene piel sensible, alterne la posición de los electrodos dentro del radius de una pulgada de la ubicación mostrada arriba.

Funcionalidad de monitoreo



Compruebe el estado del monitor utilizando los iconos LED de colores en la parte frontal:

Monitoreo:



Una luz verde parpadeante cada 10 segundos indica que funciona correctamente. La luz verde se vuelve sólida al grabar un evento activado por el paciente durante 30 segundos.

Batería cargada:



Cuando el monitor está en la base de carga y conectado a una fuente de alimentación, la luz de estado de la batería se muestra en verde fijo (completamente cargada).

Batería baja:



Una luz roja parpadeante indica que la batería está baja. Cuando se coloca en la base de carga, la luz permanecerá roja mientras se carga.

Conexión del cable:



Una luz intermitente cada 5 segundos indica que el monitor está encendido pero no conectado. Si parpadea durante el uso, compruebe que los electrodos estén bien conectados al monitor y al conector rojo.

¿Puedo viajar usando mi dispositivo?



Cuando esté fuera por varios días:

- Tome la base de carga y la fuente de alimentación USB para recargar el dispositivo.
- Recuerde traer electrodos adhesivos adicionales.

Durante el viaje en avión:

- El monitor puede activar detectores del aeropuerto, pero no se dañará. Por favor notifique a la seguridad del aeropuerto antes de ingresar al detector.
- Puede dejar el dispositivo encendido y monitoreando durante el viaje aéreo.

888-312-2742
CCMCLIFE.COM

Grabación de síntomas



Toque el dispositivo dos veces si experimenta síntomas mientras usa el monitor. Vibrará/pitará en respuesta. La luz verde de monitoreo permanecerá sólida durante 30 segundos, lo que indica que se está grabando el evento. Esto creará un marcador único para que su médico lo revise en los datos. Siempre use su dispositivo de monitoreo para garantizar un acceso rápido a información importante del corazón a menos que su médico le indique lo contrario.

Durante el monitoreo



- Cambie diariamente los electrodos adhesivos; nunca deben ser reutilizados.
- Comuníquese con el Centro de Monitoreo Cardiac-Care si tiene alguna pregunta o inquietud en cualquier momento.



Monitor portátil



Electrodos Adhesivos



Base de carga



Fuente de alimentación USB

Pasos finales



A menos que su médico le indique lo contrario, devuelva inmediatamente el monitor y los accesorios (base de carga, fuente de alimentación USB y cualquier paquete de electrodos sin abrir) para evitar cargos extra.